

防护用品说明

一、防护口罩

- 1、医用防护口罩：符合中国 GB 19083-2010
- 2、N95 口罩：美国 NIOSH 认证，非油性颗粒物过滤效率 $\geq 95\%$ 。
- 3、欧洲 N95 口罩：欧洲 FFP2 标准。
- 4、KN95 口罩：符合中国 GB 2626 强制性标准，非油性颗粒物过滤效率 $\geq 95\%$ 。

医护人员在以下情况下必须使用医用防护口罩：

- ① 近距离接触感染病人
- ② 进行有可能产生气溶胶的操作，如吸痰、插管等
- ③ 产生体液喷溅可能的操作等

其他情况可佩戴 N 95 口罩和 KN95 口罩，佩戴口罩的关键在于和面部的密合，就是不漏气！不能使用带呼吸器的防护口罩！

二、外科口罩

符合 YY 0469-2011 医用外科口罩

三、防护服

符合 GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》

二级以上医用防护服：一般衣服上有红蓝条纹

四、护目镜

二级以上医用护目镜 - Medical Safety Googles / Protective Eyewear

需要提供的材料

工商营业执照，医疗器械注册证，医疗器械生产许可证，第

优先考虑符合以下条件的产品

捐赠的国外产品参考以上标准，提供产品说明书、营业执照、进口产品生产国（区）允许生产销售的证明文件及报关单、正规的收据或电子凭证。

鉴于大家对口罩的选择较迷糊，怕捐错了用不上，这里给大家介绍一下口罩的几种不同的标准。口罩的型号和执行标准都印在口罩左侧面，可以按照这个来选购口罩。

一、口罩分为三个标准:

n95是按美国标准**NOISH**生产，厂家是**3M**和**霍尼韦尔**；

FFP2是欧洲标准**EN149**；

KN95是中国标准**GB2626-2006**。

凡是口罩上印着执行标准是这三种的都是合格口罩。

二、医用n95口罩需要防高压液体喷溅，所以比普通n95更高的标准；以3M为例，型号1860和9132是最常用的医用防护口罩。此外，还有儿童款的1860s。普通人或者不接触高压液体喷溅的医务人员，可以选择符合NOISH标准的普通n95口罩。

三、FFP2标准口罩的欧洲生产商有德国的UVEX等；FFP3则是更高层次(99)的防护口罩。

四、中国标准GB2626-2006是指普通KN95口罩标准。

医用KN95口罩标准是GB19083-2010。

(同样，普通人和不接触高压液体喷溅的医务人员，可以使用普通KN95口罩。)

五、另一个常见问题是，口罩选带阀或不带阀口罩？普通带阀的口罩比较舒适。

医用口罩不允许带阀。

当普通人为感染或疑似感染者时，必须选择不带阀的医用口罩。

六、医用外科口罩，常见的标准是YY0469-2010，或YY0469-2011，它印在每只口罩的独立外包装上。


请注意，买独立包装的外科口罩，而不是五十只一大包的哪种。

护目镜举例

3M公司的1621AF护目镜

国内

1. https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a220m.1000858.1000725.1.39fb7396ias0l4&id=10435130148&skuld=4478863987244&areald=310100&user_id=707199638&cat_id=2&is_b=1&rn=a5c733eedc41b0013a84cc6c99ac0a7e 天猫 39有货

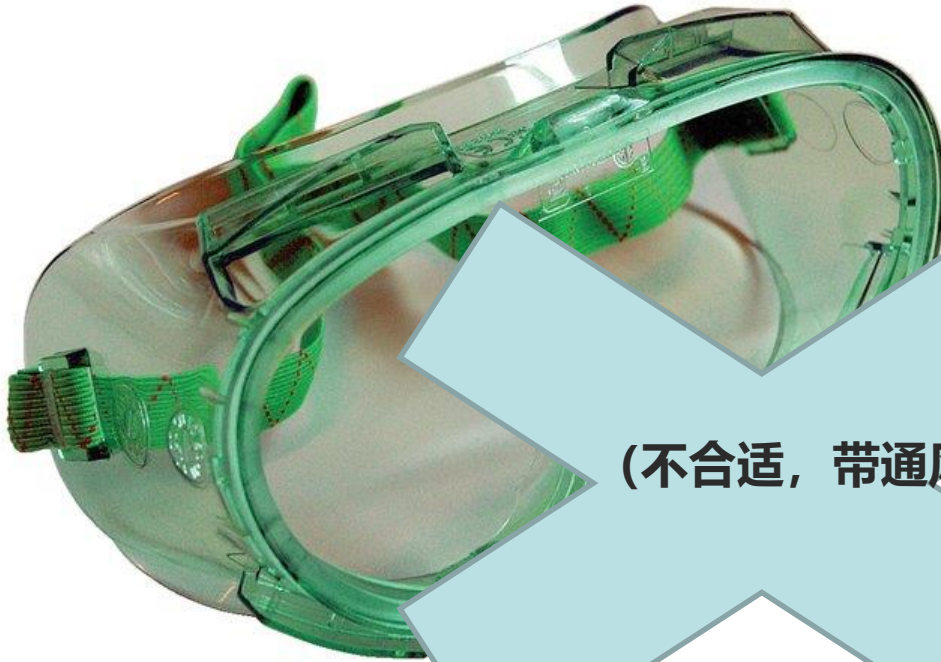

(不合适，带通风口)

Fisherbrand™ 化学防溅护目镜 (不合适，带通风口)

符合ANSI Z87.1和ANSI Z80.3标准。

其中选择19-181-504，属于化学飞溅式护目镜。四个间接通风口保护眼睛免受灰尘，雾气和其他空气传播的微粒的侵害

价格11美元

<https://www.fishersci.com/shop/products/chemical-splash-impact-goggles/p-6837028>

防护服标准

符合中国[GB19082-2009](#)《医用一次性防护服》标准。

同等参考

已经通过美国ASTM F1671-97a,

及欧标EN14126相关防血液及生化细菌穿透测验,

雷克兰AMN428ETS 灭菌型医用防护服（ 国标）（确认可用）

已经通过美国ASTM F1671-97a，及欧标EN14126相关防血液及生化细菌穿透测验，符合中国GB19082-2009《医用一次性防护服》标准。

产品参数



品牌：雷克兰

名称：医用一次性防护服

型号：AMN428ETS

材质：防护服外层为高质多微孔膜，内层为防粘聚丙烯无纺布，并制成连帽连体结构，采用胶条密封缝制，经过环氧乙烷灭菌

特点：柔软、质轻、相对较好的透气性；防静电、低脱屑，牢固耐用

用途：防粉尘颗粒物，防化学液体飞溅，通过阻隔血液，粉尘、液滴、飞沫，降低细菌、病菌向医护人员传播几率。雷克兰医用一次性防护服主要适用于防护颗粒物及轻度液体飞溅，对临床医务人员可能接触到的血液、体液、血液传播病原体、传染性悬浮微粒、干性或湿性微生物/细菌的渗透提供防护。

标准：GB19082-2009

许可：鲁食药监械生产许20140112号


编号：鲁械注准20142640179

有效期：无菌存储有效期3年

欧洲尺码

请选择适合你的胸围、身高尺码的产品，正确的选择能增强产品的舒适度并能延长使用时间

成衣尺码	身高（厘米）	胸围（厘米）
S	164-170	84-92
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	188-194	116-124
XXXL	194-200	124-132

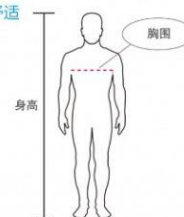

防护服举例

杜邦（DU PONT）1422A医用防护服防疫
防传染隔离病毒细菌连体带帽（符
准）**确认可用**

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.71.5b48142cjqytS9&id=611271045129&ns=1&abbucket=12#detail>



3M™ 白色戴帽防化服 4565 (可用)



4565白色带帽红色胶条连体防护服(Type4, 5&6类防

Features taped seams that help provide barrier protection against liquid splashes, hazardous dust, and certain biological contaminants.

官方说明可以标注阻止特定生物污染

杜邦Tychem F级化学防护服（符合欧洲标准）（不可以，为化工用）

